



FR	Notice d'utilisation	2
NL	Gebruikersaanwijzing	13
EN	User manual	24
DE	Gebrauchsanweisung	34
ES	Manual de instrucciones	45
IT	Istruzioni per l'uso	55
PT	Manual de utilização	65

FR
RECTO

Sangles AVANT 1

Eclusier 2

Passage pour
les parties génitales 3

4 Constricteur

5 Sangles ARRIÈRE

6 Boucles de serrage
et coussinets



FR

Passage pour
les parties génitales 3

7 Activateur

4 Constricteur

5 Sangles ARRIÈRE

1 Sangles AVANT

8 Inserts pour les sangles
ARRIERE

CEINTURE REVITALISANTE “LE ROGER”

Notice d'utilisation Le Roger

Avant d'utiliser Le Roger, prenez quelques instants pour lire ce manuel.

Identification du dispositif

Nom commercial : Le Roger

Référence produit : CR1-BS-511

 Dispositif médical de classe I – non stérile

 05419980643711



Consignes de sécurité

Lire attentivement cette notice d'instruction et les consignes de sécurité. La non-observation des avertissements et consignes de sécurité peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

Conserver les avertissements et les consignes de sécurité pour s'y reporter ultérieurement.

AVERTISSEMENT - Précautions d'usage

Pour garantir un usage optimal et un bon fonctionnement, ce produit doit être utilisé conformément aux instructions suivantes. Le Roger est uniquement prévu dans le but décrit dans le présent mode d'emploi. Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages causés par une utilisation incorrecte ou imprudente.

Indication d'utilisation

Le Roger est destiné aux hommes présentant des troubles de l'érection d'origine veineuse ou mixte, souhaitant améliorer la rigidité et la durée de l'érection par une stimulation mécanique du périnée.

Le dispositif est réservé à un usage individuel et peut être utilisé dans un cadre privé ou en accompagnement d'une rééducation périnéale sous supervision médicale.

Contre-indication

Ne pas utiliser en cas :

- d'allergie connue au latex ou à un composant du produit,
- de pathologie cutanée ou lésion dans la zone de contact,
- de troubles circulatoires sévères, d'inflammation locale ou d'infection urogénitale.

En cas de doute, demander conseil à un professionnel de santé. Tout incident grave doit être communiqué à Roger srl via l'adresse sav@leroger.com et aux

autorités locales compétentes qui vous fourniront des conseils supplémentaires.

Mise en garde et avertissements

L'utilisation sous pression ne doit pas excéder 1 heure (60 minutes).

Ne pas utiliser Le Roger si celui-ci présente des signes de dégradations (déchirures, coupures ...).

Arrêter l'utilisation si vous ressentez une douleur ou un inconfort.

Ce produit n'est pas un moyen contraceptif.

Il est conseillé d'appliquer un gel lubrifiant sur les parties poilues du corps ou d'éventuellement se raser afin d'éviter toutes gênes. N'utiliser que des gels à base d'eau pour conserver Le Roger en état.

Tenir hors de portée des enfants.

Description

Le Roger est une ceinture revitalisante souple constituée d'un assemblage de silicone médical et de tissu élastique.

Elle exerce une pression localisée au niveau du périnée afin de favoriser la restriction du retour veineux et ainsi soutenir le mécanisme naturel de l'érection.

Le dispositif agit de manière mécanique, non invasive et sans recours à un produit chimique.

Composition


Le Roger est composé :

- d'une partie ventrale percée d'une ouverture ovale **(3)** pour permettre le passage des parties génitales,
- d'un éclusier **(2)**
- d'un activateur permettant une pression localisée **(3)**
- d'un constricteur **(4)**
- de deux sangles avant **(1)**,
- de deux sangles arrière **(5)**, terminées par des boucles de serrage et de coussinet de confort **(6)**.


Dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques et le design du produit, à tout moment, sans communication spécifique.

Fonctionnement

L'érection est optimale lorsque la pression exercée sur le corps est maximale. Le réglage de cette pression s'obtient en ajustant les sangles grâce aux boucles de serrage. L'érection peut devenir douloureuse si cette pression est exagérée. Le dispositif Le Roger développe une érection naturelle qui suit le processus humain naturel : phantasmes et légères sollicitations.

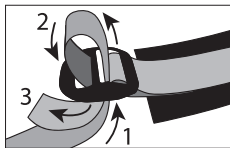


1 - Préparation des sangles : Assembler les sangles sans les croiser. Passer la sangle libre dans la boucle par le dessous, dans l'ouverture centrale. Ressortir par la seconde ouverture (mouvement aller-retour).

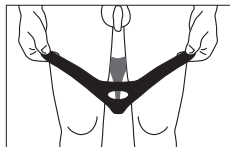

2 - Mettre le Roger : Placer la partie avant avec l'ouverture **(3)** devant vous. Enfiler Le Roger comme un sous-vêtement. Vérifier que l'activateur **(3)** sera bien contre le corps.



3 - Positionner les parties génitales : Introduire les testicules et le pénis dans l'ouverture **(3)**.

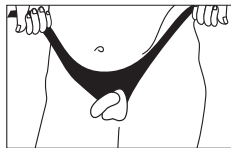

4 - Ajuster le serrage : Positionner les sangles **sur les hanches**. Serrer les deux côtés de manière équilibrée pour maintenir la bande périnéale centrée. Le Roger doit exercer une pression ferme et centrée sur la zone du périnée.

Retrait

- Détacher doucement la fermeture exercée par les boucles de serrage
- Dégager les parties génitales de la partie ventrale
- Retirer lentement le dispositif.

Nettoyage et entretien

En prenant soin du dispositif, vous augmentez sa durée de vie. Nettoyer Le Roger avant et après chaque utilisation avec un savon et de l'eau tiède. N'utiliser pas de nettoyant à base d'alcool, de javel ou avec un détergent abrasif. Essuyer-le et laisser-le sécher à l'air libre. Ne pas repasser. Garder-le dans un endroit sec et propre à l'abri de la lumière et de la chaleur. Éviter le contact prolongé avec les huiles ou lubrifiants à base de silicone. Ranger-le dans un endroit sec et propre à l'abri de la chaleur.

Information sur la mise au rebut et le recyclage

Jeter Le Roger dans les déchets ménagers. Ne pas jeter sur la voie publique ou dans la nature.

GARANTIE

Le Roger est garanti 2 ans.

Conditions de garantie

Ce produit est couvert par une garantie contre les défauts de fabrication, dont la durée dépend de la législation en vigueur dans chaque pays (2 ans dans l'Union Européenne). En cas de recours à la garantie, veuillez-vous adresser au service clientèle de Roger srl. S'il est nécessaire d'expédier le produit, veuillez indiquer le défaut constaté et joindre une copie du justificatif d'achat.

Les conditions de garantie sont les suivantes :

1. Une garantie de deux ans à compter de la date d'achat est accordée sur les produits Roger. En cas d'intervention de la garantie, la date d'achat doit être prouvée en présentant le justificatif d'achat ou la facture.
2. Durant la période de garantie, les défauts liés à des erreurs de matériel ou de fabrication sont pris en charge gratuitement (hors frais d'envois).
3. Les services effectués sous garantie n'entraînent pas de prolongation de la période de garantie, ni pour le produit, ni pour les composants remplacés.
4. Sont exclus de la garantie :
 - a. tous les dommages dus à un usage incorrect, par exemple au non-respect de la notice d'utilisation.
 - b. les dommages dus à une remise en état ou des interventions effectuées par l'acheteur ou par de tierces personnes non autorisées.
 - c. les dommages survenus durant le transport de l'appareil depuis le site du fabricant jusque chez l'utilisateur ou lors de l'expédition de l'appareil au service clientèle.
 - d. les accessoires soumis à une usure normale.
5. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs causés directement ou indirectement par le produit, y compris lorsque le dommage survenu sur le produit est couvert par la garantie.

Service consommateur

info@leroger.com

Ce produit est strictement réservé aux adultes. Ne pas laisser à la portée des enfants.

Distribué par Roger srl, 24 rue de la Lasne, 1380 Lasne, Belgique

Roger srl® et Le Roger® sont des marques déposées. Tous droits réservés.

Le design de la ceinture Le Roger est une œuvre d'art et est protégé par un copyright.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur **www.leroger.com**

Dernière révision : 11/2025 – Version 1.1

Lot : voir emballage.

Veillez à conserver une preuve d'achat et l'étiquette du lot/SN pendant toute la durée de la garantie.

Sujet à modification sans préavis



DE REVITALISERENDE GORDEL “LE ROGER”

Gebruiksaanwijzing Le Roger

Neem even de tijd om deze handleiding door te lezen voordat u Le Roger gaat gebruiken.

Identificatie van het apparaat

Handelsnaam: Le Roger

Productreferentie: CR1-BS-511

MD Medisch hulpmiddel van klasse I – niet steriel

UDI 05419980643711

**Veiligheidsvoorschriften**

Lees deze gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften aandachtig door. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften kan leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade.

Bewaar de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften voor later gebruik.

WAARSCHUWING - Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Om een optimaal gebruik en een goede werking te garanderen, moet dit product worden gebruikt in overeenstemming met de volgende instructies. De Roger is uitsluitend bedoeld voor het doel dat in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van onjuist of onvoorzichtig gebruik.

Indicatie voor gebruik

De Roger is bedoeld voor mannen met erectiestoornissen van veneuze of gemengde oorsprong, die de stijfheid en duur van de erectie willen verbeteren door mechanische stimulatie van het perineum.

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor individueel gebruik en kan worden gebruikt in een privé-omgeving of als aanvulling op perineale revalidatie onder medisch toezicht.

Contra-indicatie

Niet gebruiken in geval van:

- bekende allergie voor latex of een bestanddeel van het product,
- huidaandoening of letsel in het contactgebied,
- ernstige circulatiestoornissen, lokale ontsteking of urogenitale infectie.

Raadpleeg bij twijfel een arts. Elk ernstig incident moet worden gemeld aan Roger srl via het e-mailadres sav@leroger.com en aan de bevoegde lokale autoriteiten, die u verder advies zullen geven.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Het gebruik onder druk mag niet langer duren dan 1 uur (60 minuten).

Gebruik Le Roger niet als het tekenen van beschadiging vertoont (scheuren, sneden, enz.).

Stop het gebruik als u pijn of ongemak voelt.

Dit product is geen anticonceptiemiddel.

Het wordt aangeraden om een glijmiddel op de behaarde delen van het lichaam aan te brengen of u eventueel te scheren om ongemak te voorkomen. Gebruik alleen gels op waterbasis om Le Roger in goede staat te houden.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Beschrijving

Le Roger is een soepele revitaliserende gordel die bestaat uit een combinatie van medische siliconen en elastisch weefsel.

Het oefent lokale druk uit op het perineum om de veneuze terugkeer te beperken en zo het natuurlijke mechanisme van de erectie te ondersteunen.

Het apparaat werkt op mechanische wijze, is niet-invasief en maakt geen gebruik van chemische producten.

NL
RECTO

VOORSTE riemen **1**
Sluis **2**
Opening voor de
geslachtsdelen **3**

4 Constrictor

5 ACHTERSE riemen

6 Gespen en
comfortkussentjes



Opening voor de
geslachtsdelen **3**

Activator **7**

Constrictor **4**

5 ACHTERSE riemen

8 Inzetstukken voor
ACHTERSE riemen

NL

1
VOORSTE riemen


Samenstelling

De Roger bestaat uit:

- een buikgedeelte met een ovale opening **(3)** voor de geslachtsdelen,
- een sluis **(2)**
- een activator voor lokale druk **(3)**
- een constrictor **(4)**,
- twee voorste riemen **(1)**,
- twee achterste riemen **(5)**, voorzien van gespen en comfortkussentjes **(6)**.


In het kader van de voortdurende verbetering van zijn producten behoudt de fabrikant zich het recht voor om de technische specificaties en het ontwerp van het product op elk moment te wijzigen, zonder specifieke mededeling.

AANBRENGEN

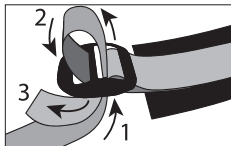

1- Voorbereiding van de riemen:

Bevestig de riemen zonder ze te kruisen. Haal de vrije riem van onderaf door de gesp, in de centrale opening. Haal hem weer naar buiten door de tweede opening (heen-en-weerbeweging).

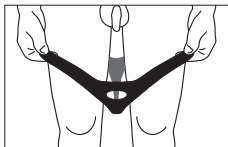


2 - De Roger aanbrengen:

Plaats het voorste deel met de opening **(3)** naar u toe. Trek de Roger aan als ondergoed. Controleer of de activator **(3)** goed tegen het lichaam aanligt.



3 - De geslachtsdelen positioneren: Breng de testikels en de penis in de opening **(3)**.

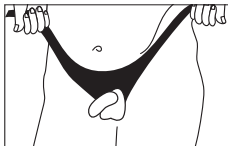

4 - De spanning aanpassen: Plaats de riemen **op de heupen**. Trek beide zijden gelijkmatig aan om de perineale band gecentreerd te houden. De Roger moet een stevige en gecentreerde druk uitoefenen op het perineale gebied.

Werking

De erectie is optimaal wanneer de druk op het lichaam maximaal is. Deze druk kan worden aangepast door de riemen met behulp van de gespen te verstellen. De erectie kan pijnlijk worden als deze druk te groot is.

Het Roger-apparaat zorgt voor een natuurlijke erectie die het natuurlijke menselijke proces volgt: fantasieën en lichte prikkeling.

Verwijderen

- Maak voorzichtig de sluiting van de gespen los
- Haal de geslachtsdelen uit het buikgedeelte
- Verwijder het apparaat langzaam

Reiniging en onderhoud

Door het apparaat goed te verzorgen, verlengt u de levensduur ervan. Reinig de Roger voor en na elk gebruik met zeep en lauw water. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van alcohol, bleekmiddel of schurende reinigingsmiddelen. Droog het apparaat af en laat het aan de lucht drogen. Niet strijken. Bewaar het apparaat op een droge, schone plaats, uit de buurt van licht en warmte. Vermijd langdurig contact met siliconenhoudende oliën of smeermiddelen. Bewaar het apparaat op een droge, schone plaats, uit de buurt van warmte.

Informatie over afvalverwerking en recycling

Gooi de Roger weg bij het huishoudelijk afval. Gooi het niet op straat of in de natuur.

GARANTIE

De Roger heeft een garantie van 2 jaar.

Garantievoorwaarden

Dit product wordt gedekt door een garantie tegen fabricagefouten, waarvan de duur afhankelijk is van de geldende wetgeving in elk land (2 jaar in de Europese Unie).

Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met de klantenservice van Roger srl. Als het product moet worden verzonden, vermeld dan het geconstateerde defect en voeg een kopie van het aankoopbewijs bij.

De garantievoorwaarden zijn als volgt:

1. Op Roger-producten wordt een garantie van twee jaar vanaf de aankoopdatum verleend. Bij een beroep op de garantie moet de aankoopdatum worden aangetoond door het aankoopbewijs of de factuur te overleggen.
2. Tijdens de garantieperiode worden defecten als gevolg van materiaal- of fabricagefouten kosteloos verholpen (exclusief verzendkosten).
3. Garantiewerkzaamheden leiden niet tot verlenging van de garantieperiode, noch voor het product, noch voor de vervangen onderdelen.

4. Uitgesloten van de garantie zijn:

- a. alle schade als gevolg van onjuist gebruik, bijvoorbeeld door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing.
- b. schade als gevolg van reparaties of ingrepen door de koper of door onbevoegde derden.
- c. schade die is ontstaan tijdens het transport van het apparaat van de fabrikant naar de gebruiker of tijdens het verzenden van het apparaat naar de klantenservice.
- d. accessoires die onderhevig zijn aan normale slijtage.

5. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgschade die direct of indirect door het product is veroorzaakt, ook niet wanneer de schade aan het product onder de garantie valt.

Klantenservice

info@leroger.com

Dit product is uitsluitend bestemd voor volwassenen. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Gedistribueerd door Roger srl, 24 rue de la Lasne, 1380 Lasne, België

Roger srl® en Le Roger® zijn gedeponeerde handelsmerken. Alle rechten voorbehouden.

Het ontwerp van de Le Roger-riem is een kunstwerk en wordt beschermd door

een copyright.

Ga voor meer informatie naar www.leroger.com

Laatste herziening: 11/2025 – Versie 1.1.

Partij: zie verpakking.

Bewaar het aankoopbewijs en het lotnummer/SN-label gedurende de gehele garantieperiode.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.



EN REVITALIZING BELT “LE ROGER”

Le Roger User Manual

Before using Le Roger, please take a few moments to read this manual.

Device identification

Trade name: Le Roger

Product reference: CR1-BS-511

 Class I medical device – non-sterile

 05419980643711



Safety instructions

Read these instructions and safety instructions carefully. Failure to follow the warnings and safety instructions may result in personal injury or property damage.

Keep the warnings and safety instructions for future reference.

WARNING - Precautions for use

To ensure optimal use and proper functioning, this product must be used in accordance with the following instructions. Le Roger is intended solely for the purpose described in this user manual. The manufacturer cannot be held liable for damage caused by incorrect or careless use.

Indications for use

Le Roger is intended for men with venous or mixed erectile dysfunction who

wish to improve the rigidity and duration of their erections through mechanical stimulation of the perineum.

The device is for individual use only and may be used in a private setting or as part of perineal rehabilitation under medical supervision.

Contraindications

Do not use in the following cases:

- known allergy to latex or any component of the product,
- skin condition or injury in the contact area,
- severe circulatory disorders, local inflammation or urogenital infection.

If in doubt, seek advice from a healthcare professional. Any serious incidents must be reported to Roger srl via sav@leroger.com and to the relevant local authorities, who will provide you with further advice.

Cautions and warnings

Do not use under pressure for more than 1 hour (60 minutes).

Do not use Le Roger if it shows signs of damage (tears, cuts, etc.).

Discontinue use if you experience pain or discomfort.

This product is not a contraceptive.

It is advisable to apply a lubricating gel to hairy parts of the body or to shave to avoid discomfort. Only use water-based gels to keep Le Roger in good condition.

Keep out of reach of children

EN
RECTO

FRONT straps **1**

Lock **2**

Opening to allow
the genitals to pass
through **3**

4 Constrictor

5 REAR straps

6 Tightening buckles and
comfort pads



Opening to allow
the genitals to pass
through **3**

Activator **7**

Constrictor **4**

5 REAR straps

8 Inserts for REAR straps

EN

1 FRONT straps

Description

Le Roger is a flexible revitalising belt made from a combination of medical-grade silicone and elastic fabric.

It applies localised pressure to the perineum to restrict venous return and thus support the natural mechanism of erection.

The device works mechanically, non-invasively and without the use of chemicals.



Composition

Le Roger consists of:

- a ventral section with an oval opening **(3)** to allow the genitals to pass through,
- a lock **(2)**
- an activator allowing localized pressure **(3)**
- a constrictor **(4)**,
- two front straps **(1)**,
- two rear straps **(5)**, ending in tightening buckles and comfort pads **(6)**.

As part of its ongoing product improvement program, the manufacturer reserves the right to modify the technical specifications and design of the product at any time without specific notice.


FITTING

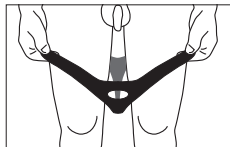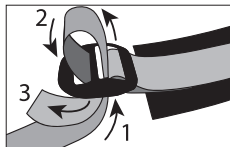

1 - Preparing the straps: Assemble the straps without crossing them. Pass the free strap through the buckle from underneath, through the central opening. Pull it out through the second opening (back and forth movement)

2 - Putting on Le Roger: Place the front part with the opening **(3)** in front of you. Put on Le Roger like underwear. Check that the activator **(3)** is positioned against the body.

3 - Positioning the genitals: Insert the testicles and penis into the opening **(3)**.

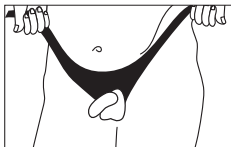

4 - Adjusting the tightness:

Position the straps **on the hips**.

Tighten both sides evenly to keep the perineal band centered. Le Roger should exert firm, centered pressure on the perineal area.

How it works

Erection is optimal when the pressure exerted on the body is at its maximum.

This pressure can be adjusted by tightening the straps using the buckles.

Erections can become painful if this pressure is excessive.

Le Roger device develops a natural erection that follows the natural human process: fantasies and light stimulation.

Removal

- Gently loosen the closure provided by the tightening buckles
- Free the genitals from the abdominal part
- Slowly remove the device

Cleaning and maintenance

Taking care of the device will increase its lifespan. Clean Le Roger before and after each use with soap and warm water. Do not use alcohol-based cleaners, bleach, or abrasive detergents. Wipe it dry and leave it to air dry. Do not iron. Store it in a dry, clean place away from light and heat. Avoid prolonged contact with silicone-based oils or lubricants. Store it in a dry, clean place away from heat.

Disposal and recycling information

Dispose of Le Roger in household waste. Do not dispose of on public roads or in the environment.

WARRANTY

Le Roger is guaranteed for 2 years.

Warranty conditions

This product is covered by a warranty against manufacturing defects, the duration of which depends on the legislation in force in each country (2 years in the European Union).

If you need to make a warranty claim, please contact Roger srl customer service. If you need to ship the product, please indicate the defect and include a copy of the proof of purchase.

The warranty terms and conditions are as follows:

1. Roger products are covered by a two-year warranty from the date of purchase. In the event of a warranty claim, proof of purchase must be provided in the form of a receipt or invoice.
2. During the warranty period, defects related to material or manufacturing errors will be covered free of charge (excluding shipping costs).
3. Services performed under warranty do not extend the warranty period for either the Product or the replaced components.
4. The following are excluded from the warranty:
 - a. Any damage due to improper use, for example, failure to follow the user manual.
 - b. Damage due to repairs or interventions carried out by the purchaser or unauthorized third parties.
 - c. damage occurring during transport of the device from the manufacturer's site to the user or during shipment of the device to customer service.
 - d. accessories subject to normal wear and tear.
5. We accept no liability for consequential damage caused directly or indirectly by the product, including when the damage to the product is covered by the warranty.

Customer service

info@leroger.com

This product is strictly for adults only. Keep out of reach of children.

Distributed by Roger srl, 24 rue de la Lasne, 1380 Lasne, Belgium

Roger srl® and Le Roger® are registered trademarks. All rights reserved.

The design of the Le Roger belt is a work of art and is protected by copyright.

For more information, visit **www.leroger.com**

Last revision: 11/2025 – Version 1.1.

Batch: see packaging.

Please keep proof of purchase and the lot/SN label for the duration of the warranty.

Subject to change without notice.



DE REVITALISIERENDE GÜRTEL “LE ROGER”

Gebrauchsanweisung Le Roger

Nehmen Sie sich vor der Verwendung von Le Roger bitte einen Moment Zeit, um diese Anleitung durchzulesen.

Identifizierung des Geräts

Handelsname: Le Roger

Produktreferenz: CR1-BS-511

MD Medizinisches Gerät der Klasse I – nicht steril

UDI 05419980643711



Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Sicherheitshinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Bewahren Sie die Warnhinweise und Sicherheitshinweise zum späteren Nachschlagen auf.

WARNUNG – Vorsichtsmaßnahmen

Um eine optimale Nutzung und einwandfreie Funktion zu gewährleisten, muss dieses Produkt gemäß den folgenden Anweisungen verwendet werden. Le

DE

Roger ist ausschließlich für den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck vorgesehen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße oder unvorsichtige Verwendung entstehen.

Anwendungshinweise

Le Roger ist für Männer mit venösen oder gemischten Erektionsstörungen bestimmt, die die Steifheit und Dauer ihrer Erektion durch mechanische Stimulation des Damms verbessern möchten.

Das Gerät ist für den individuellen Gebrauch bestimmt und kann privat oder begleitend zu einer perinealen Rehabilitation unter ärztlicher Aufsicht verwendet werden.

Kontraindikationen

Nicht verwenden bei:

- bekannter Allergie gegen Latex oder einen Bestandteil des Produkts,
- Hauterkrankungen oder Verletzungen im Kontaktbereich,
- schweren Durchblutungsstörungen, lokalen Entzündungen oder urogenitalen Infektionen.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen Arzt. Jeder schwerwiegende Vorfall muss Roger srl unter der Adresse sav@leroger.com und den zuständigen lokalen Behörden gemeldet werden, die Ihnen weitere Ratschläge geben werden.

DE
RECTO

VORDEREN Gurten **1**

Schleusenwärter **2**

Öffnung für die
Genitalien **3**

4 Konstriktor

5 HINTEREN Gurten

6 Schraubverschlüssen
und Komfortpolstern



Öffnung für die
Genitalien **3**

Activateur **7**

Constricteur **4**

VORDEREN Gurten **1**

5 HINTEREN Gurten

8 Einsätze für die
HINTEREN Gurten

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Die Verwendung unter Druck darf 1 Stunde (60 Minuten) nicht überschreiten.

Verwenden Sie Le Roger nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen (Risse, Schnitte usw.) aufweist.

Beenden Sie die Anwendung, wenn Sie Schmerzen oder Unbehagen verspüren. Dieses Produkt ist kein Verhütungsmittel.

Es wird empfohlen, ein Gleitgel auf die behaarten Körperstellen aufzutragen oder sich gegebenenfalls zu rasieren, um Beschwerden zu vermeiden. Verwenden Sie nur Gels auf Wasserbasis, um Le Roger in gutem Zustand zu halten.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Beschreibung

Le Roger ist ein flexibler Revitalisierungsgürtel aus medizinischem Silikon. Le Roger ist ein flexibler, revitalisierender Gürtel aus medizinischem Silikon und elastischem Gewebe.

Er übt einen gezielten Druck auf den Damm aus, um den venösen Rückfluss zu hemmen und so den natürlichen Erektionsmechanismus zu unterstützen.

Das Gerät wirkt mechanisch, nicht invasiv und ohne den Einsatz von Chemikalien.

Zusammensetzung

Le Roger besteht aus:

- einem Bauteil mit einer ovalen Öffnung **(3)** für die Genitalien,
- einem Schleusenwärter **(2)**
- einem Aktivator für lokalisierten Druck **(3)**
- einem Konstriktor **(4)**,
- zwei vorderen Gurten **(1)**,
- zwei hinteren Gurten **(5)**, die mit Schraubverschlüssen und Komfortpolstern versehen sind **(6)**.


Im Rahmen der kontinuierlichen Verbesserung seiner Produkte behält sich der Hersteller das Recht vor, die technischen Spezifikationen und das Design des Produkts jederzeit ohne besondere Ankündigung zu ändern.

Funktionsweise


Die Erektion ist optimal, wenn der Druck auf den Körper maximal ist. Dieser Druck lässt sich durch Verstellen der Gurte mit Hilfe der Schnallen einstellen.

Die Erektion kann schmerzhaft werden, wenn dieser Druck zu stark ist.

Le Roger-Gerät entwickelt eine natürliche Erektion, die dem natürlichen menschlichen Prozess folgt: Fantasien und leichte Stimulation.

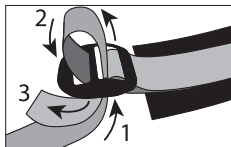


1 - Vorbereitung der Gurte: Die Gurte zusammenfügen, ohne sie zu kreuzen. Den freien Gurt von unten durch die mittlere Öffnung in die Schnalle einführen. Durch die zweite Öffnung wieder herausziehen (Hin- und Herbewegung).

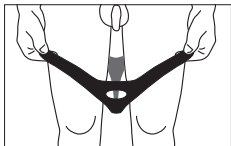

2 - Anlegen des Le Roger: Legen Sie den vorderen Teil mit der Öffnung **(3)** vor sich hin. Ziehen Sie den Le Roger wie Unterwäsche an. Vergewissern Sie sich, dass der Aktivator **(3)** gut am Körper anliegt.



3 - Positionieren der Genitalien: Führen Sie die Hoden und den Penis in die Öffnung **(3)** ein.

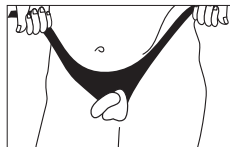

4 - Anpassen der Spannung: Positionieren Sie die Gurte **auf den Hüften**. Ziehen Sie beide Seiten gleichmäßig fest, damit das Dammband mittig sitzt. Le Roger muss einen festen und mittigen Druck auf den Dammbereich ausüben.

Entfernen

- Lösen Sie vorsichtig den Verschluss der Klammern.
- Befreien Sie die Genitalien vom Bauchbereich.
- Entfernen Sie das Gerät langsam.

Reinigung und Pflege

Durch die richtige Pflege des Geräts verlängern Sie dessen Lebensdauer. Reinigen Sie Le Roger vor und nach jedem Gebrauch mit Seife und lauwarmem Wasser. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel auf Alkoholbasis, Bleichmittel oder Scheuermittel. Wischen Sie es ab und lassen Sie es an der Luft trocknen. Nicht bügeln. Bewahren Sie es an einem trockenen und sauberen Ort vor Licht und Wärme geschützt auf. Vermeiden Sie längeren Kontakt mit Ölen oder Schmier-

mitteln auf Silikonbasis. Bewahren Sie es an einem trockenen und sauberen Ort vor Wärme geschützt auf.

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling

Entsorgen Sie den Le Roger im Hausmüll. Nicht auf öffentlichen Straßen oder in der Natur entsorgen.

GARANTIE

Le Roger hat eine Garantie von 2 Jahren.

Garantiebedingungen

Dieses Produkt unterliegt einer Garantie gegen Herstellungsfehler, deren Dauer von den geltenden Rechtsvorschriften des jeweiligen Landes abhängt (2 Jahre in der Europäischen Union).

Im Falle einer Inanspruchnahme der Garantie wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Roger srl. Wenn das Produkt eingeschickt werden muss, geben Sie bitte den festgestellten Mangel an und legen Sie eine Kopie des Kaufbelegs bei.

Die Garantiebedingungen lauten wie folgt:

1. Auf Roger-Produkte wird eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum gewährt. Im Falle einer Inanspruchnahme der Garantie muss das Kaufdatum durch Vorlage des Kaufbelegs oder der Rechnung nachgewiesen werden.

2. Während der Garantiezeit werden Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos behoben (ohne Versandkosten).

3. Garantieleistungen führen weder für das Produkt noch für die ausgetauschten Komponenten zu einer Verlängerung der Garantiezeit.

4. Von der Garantie ausgeschlossen sind:

a. alle Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind, z. B. durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung.

b. Schäden, die durch Reparaturen oder Eingriffe des Käufers oder unbefugter Dritter entstanden sind.

c. Schäden, die während des Transports des Geräts vom Hersteller zum Benutzer oder beim Versand des Geräts an den Kundendienst entstanden sind.

d. Zubehörteile, die einem normalen Verschleiß unterliegen.

5. Wir übernehmen keine Haftung für Folgeschäden, die direkt oder indirekt durch das Produkt verursacht werden, auch wenn der am Produkt entstandene Schaden unter die Garantie fällt.

Kundendienst

info@leroger.com

Dieses Produkt ist ausschließlich für Erwachsene bestimmt. Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.

Vertrieb durch Roger srl, 24 rue de la Lasne, 1380 Lasne, Belgien

Roger srl® und Le Roger® sind eingetragene Marken. Alle Rechte vorbehalten.
Das Design des Le Roger-Gürtels ist ein Kunstwerk und urheberrechtlich geschützt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.leroger.com

Letzte Überarbeitung: 11/2025 – Version 1.1

Chargennummer: siehe Verpackung.

Bewahren Sie den Kaufbeleg und das Chargen-/SN-Etikett während der gesamten Garantiezeit auf.

Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Le Roger Manual de instrucciones

Antes de utilizar Le Roger, dedique unos minutos a leer este manual

Identificación del dispositivo

Nombre comercial: Le Roger

Referencia del producto: CR1-BS-511

MD Dispositivo médico de clase I – no estéril

UDI 05419980643711



Consignas de seguridad

Lea atentamente este manual de instrucciones y las consignas de seguridad. El incumplimiento de las advertencias y las consignas de seguridad pueden provocar lesiones corporales o daños materiales.

Conserve las advertencias y las instrucciones de seguridad para consultarlas posteriormente.

ADVERTENCIA: precauciones de uso

Para garantizar un uso óptimo y un buen funcionamiento, este producto debe utilizarse conformemente a las siguientes instrucciones. Le Roger está diseñado exclusivamente para el fin descrito en este manual de instrucciones. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso incorrecto o imprudente.

ES
RECTO

Correas DELANTERAS **1**

Esclusero **2**

Paso de los
genitales **3**

4 Constrictor

5 Correas TRASERAS

6 Rematadas con hebillas de ajuste y
almohadillas de confort



ES

Paso de los
genitales **3**

Activador **7**

Constrictor **4**

Correas DELANTERAS **1**

5 Correas TRASERAS

8 Inserciones para las correas
TRASERAS

Indicaciones de uso

Le Roger está destinado a hombres con trastornos de la erección de origen venoso o mixto que deseen mejorar la rigidez y la duración de la erección mediante la estimulación mecánica del perineo.

El dispositivo está reservado para uso individual y puede utilizarse en el ámbito privado o como complemento de una rehabilitación perineal bajo supervisión médica.

Contraindicaciones

No utilizar en caso de:

- alergia conocida al látex o a cualquier componente del producto,
- patología cutánea o lesión en la zona de contacto,
- trastornos circulatorios graves, inflamación local o infección urogenital.

En caso de duda, consulte a un profesional de la salud. Cualquier incidente grave debe comunicarse a Roger srl a través de la dirección sav@leroger.com y a las autoridades locales competentes, que le proporcionarán asesoramiento adicional.

Advertencias y precauciones

El uso bajo presión no debe exceder 1 hora (60 minutos).

No utilice Le Roger si presenta signos de deterioro (desgarros, cortes, etc.).

No lo utilice si siente dolor o molestias.

Este producto no es un método anticonceptivo.

Se recomienda aplicar un gel lubricante en las zonas con vello o, si es necesario, afeitarse para evitar molestias. Utilice únicamente geles a base de agua para mantener Le Roger en buen estado.

Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Descripción

Le Roger es un cinturón revitalizante flexible compuesto por una combinación de silicona médica y tejido elástico.

Ejerce una presión localizada en el perineo para favorecer la restricción del retorno venoso y así apoyar el mecanismo natural de la erección.

El dispositivo actúa de forma mecánica, no invasiva y sin recurrir a productos químicos.


Composición

- una parte ventral con una abertura ovalada **(3)** para permitir el paso de los genitales,
- un esclusero **(2)**
- un activador que permite una presión localizada **(3)**
- un constrictor **(4)**
- dos correas delanteras **(1)**,
- dos correas traseras **(5)**, rematadas con hebillas de ajuste y almohadillas de confort **(6)**.


Con el fin de mejorar continuamente sus productos, el fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas y el diseño del producto en cualquier momento sin previo aviso.

Funcionamiento

CÓMO COLOCAR LE ROGER:

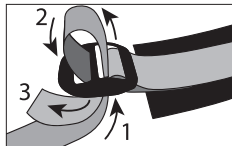


1 - Preparación de las correas:
Ensamble las correas sin cruzarlas. Pase la correa libre por la hebilla desde abajo, por la abertura central. Sáquela por la segunda abertura (movimiento de ida y vuelta) (Véase el esquema de montaje de la hebilla)

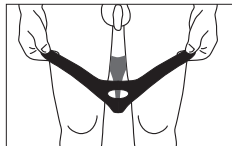

2 - Colocar Le Roger : Posicione la parte delantera con la abertura (3) frente a usted. Póngase Le Roger como si fuera una prenda íntima. Compruebe que el activador (3) quede bien ajustado al cuerpo.



3 - Introduzca los testículos y el pene en la abertura (3).

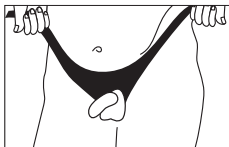

4 - Ajuste de la tensión:
coloque las correas **en las caderas**.

La erección es óptima cuando la presión ejercida sobre el cuerpo es máxima. El ajuste de esta presión se consigue regulando las correas mediante las hebillas de sujeción. La erección puede resultar dolorosa si la presión es excesiva. El dispositivo Le Roger desarrolla una erección natural que sigue el proceso humano natural: fantasías y ligeras estimulaciones.

Cómo retirar Le Roger

- Afloje suavemente el cierre de las hebillas de ajuste.
- Separe los genitales de la parte ventral.
- Retire lentamente el dispositivo

Limpieza y mantenimiento

El buen mantenimiento del dispositivo aumentará su vida útil. Limpie Le Roger antes y después de cada uso con jabón y agua tibia. No utilice productos a base de alcohol, lejía o detergentes abrasivos. Déjelo secar al aire libre. No lo planche. . Evite el contacto prolongado con aceites o lubricantes a base de silicona. Guárdelo en un lugar seco y limpio, protegido del calor.

Información sobre eliminación y reciclaje

Deseche Le Roger en la basura doméstica. No lo tire en la vía pública ni en el medio ambiente.

GARANTÍA

Le Roger tiene una garantía de 2 años.

Condiciones de garantía

Este producto está cubierto por una garantía contra defectos de fabricación, cuya duración depende de la legislación vigente en cada país (2 años en la Unión Europea). En caso de recurrir a la garantía, diríjase al servicio de atención

al cliente de Roger srl. Si fuera necesario enviar el producto, indique el defecto detectado y adjunte una copia del recibo de compra.

Las condiciones de garantía son las siguientes:

- 1.Los productos Roger tienen una garantía de dos años a partir de la fecha de compra. En caso de intervención de la garantía, se deberá acreditar la fecha de compra presentando el recibo de compra o la factura.
- 2.Durante el periodo de garantía, los defectos del material o de fabricación se cubren de forma gratuita (excepto los gastos de envío).
- 3.Los servicios prestados en garantía no suponen una prolongación del periodo de garantía, ni para el producto ni para los componentes sustituidos.
- 4.Quedan excluidos de la garantía:
 - a. Todos los daños debidos a un uso incorrecto, por ejemplo, el incumplimiento de las instrucciones de uso
 - b. Los daños debidos a reparaciones o intervenciones realizadas por el comprador o por terceros no autorizados.
 - c. Los daños producidos durante el transporte del aparato desde las instalaciones del fabricante hasta el domicilio del usuario o durante el envío del producto al servicio de atención al cliente.
 - d.los accesorios sujetos a un desgaste normal.
- 5.No nos hacemos responsables de los daños causados directa o indirectamente por el producto, incluso cuando el daño sufrido por el producto esté

cubierto por la garantía.

Servicio de atención al cliente

info@leroger.com

Este producto está estrictamente reservado a adultos. Mantener fuera del alcance de los niños.

Distribuido por Roger srl, 24 rue de la Lasne, 1380 Lasne, Bélgica.

Roger srl® y Le Roger® son marcas registradas. Todos los derechos reservados. El diseño del cinturón Le Roger es una obra de arte y está protegido por derechos de autor.

Para obtener más información, visite www.leroger.com

Última revisión: 11/2025 – Versión 1.1.

Lote: ver embalaje.

Conserve el comprobante de compra y la etiqueta del lote/SN durante todo el periodo de garantía.

Sujeto a modificaciones sin previo aviso.



Istruzioni per l'uso Le Roger

Prima di utilizzare Le Roger, dedicare qualche minuto alla lettura del presente manuale.

Identificazione del dispositivo

Nome commerciale: Le Roger

Codice prodotto: CR1-BS-511

MD Dispositivo medico di classe I – non sterile

UDI 05419980643711



Istruzioni di sicurezza

Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e le istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni di sicurezza può causare lesioni personali o danni materiali.

Conservare le avvertenze e le istruzioni di sicurezza per poterle consultare in futuro.

AVVERTENZA - Precauzioni d'uso

Per garantire un utilizzo ottimale e un corretto funzionamento, questo prodot-

to deve essere utilizzato secondo le seguenti istruzioni. Le Roger è destinato esclusivamente all'uso descritto nel presente manuale d'uso. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per danni causati da un uso improprio o imprudente.

Indicazioni per l'uso

Le Roger è destinato agli uomini con disturbi dell'erezione di origine venosa o mista che desiderano migliorare la rigidità e la durata dell'erezione attraverso la stimolazione meccanica del perineo. Il dispositivo è riservato all'uso individuale e può essere utilizzato in ambito privato o in accompagnamento a una riabilitazione perineale sotto supervisione medica.

Controindicazioni

Non utilizzare in caso di:

- allergia nota al lattice o a un componente del prodotto,
- patologie cutanee o lesioni nella zona di contatto,
- gravi disturbi circolatori, infiammazioni locali o infezioni urogenitali.

In caso di dubbio, consultare un medico. Qualsiasi incidente grave deve essere segnalato a Roger srl all'indirizzo sav@leroger.com e alle autorità locali competenti, che forniranno ulteriori consigli.

Avvertenze e precauzioni

L'uso sotto pressione non deve superare 1 ora (60 minuti).

Non utilizzare Le Roger se presenta segni di deterioramento (strappi, tagli, ecc.). Interrompere l'uso se si avverte dolore o fastidio.

Questo prodotto non è un contraccettivo.

Si consiglia di applicare un gel lubrificante sulle parti pelose del corpo o eventualmente di radersi per evitare fastidi. Utilizzare solo gel a base d'acqua per mantenere Le Roger in buono stato.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Descrizione

Le Roger è una cintura rivitalizzante flessibile costituita da un assemblaggio di silicone medico e tessuto elastico. Esercita una pressione localizzata a livello del perineo per favorire la restrizione del ritorno venoso e sostenere così il meccanismo naturale dell'erezione. Il dispositivo agisce in modo meccanico, non invasivo e senza ricorrere a prodotti chimici.

IT
RECTO

Cinghie ANTERIORI

1

Chiavistello

2

Passaggio dei
genitali

3

4

Costrittore

5

Cinghie POSTERIORI

6

Fibbie di serraggio e da un
cuscinetto di comfort



IT

Passaggio dei
genitali

3

Attivatore

7

Costrittore

4

Cinghie ANTERIORI

1

Cinghie POSTERIORI

5

8

Inserti per le
cinghie POSTERIORI


Composizione

Le Roger è composto da:

- una parte ventrale con un'apertura ovale **(3)** per consentire il passaggio dei genitali,
- un chiavistello **(2)**
- un attivatore che consente una pressione localizzata **(7)**
- di un costringitore **(4)**,
- di due cinghie anteriori, **(1)**
- di due cinghie posteriori **(5)**, terminate da fibbie di serraggio e da un cuscinetto di comfort **(6)**.


Nell'ambito del miglioramento continuo dei propri prodotti, il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche e il design del prodotto in qualsiasi momento, senza comunicazione specifica.

POSIZIONAMENTO

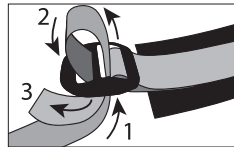

1- Preparazione delle cinghie:


assemblare le cinghie senza incrociarle. Far passare la cinghia libera nella fibbia dal basso, nell'apertura centrale. Farla uscire dalla seconda apertura (movimento di andata e ritorno)

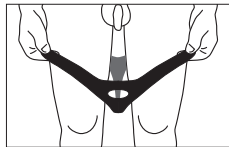

2 - Indossare Le Roger: posizionare la parte anteriore con l'apertura **(3)** davanti a sé. Indossare Le Roger come un indumento intimo. Verificare che l'attivatore **(3)** sia ben aderente al corpo.



3 - Posizionare i genitali: inserire i testicoli e il pene nell'apertura **(3)**

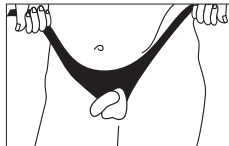

4 - Regolare la tensione: posizionare le cinghie **sui fianchi**.

Stringere entrambi i lati in modo equilibrato per mantenere la fascia perineale centrata. Le Roger deve esercitare una pressione decisa e centrata sulla zona del perineo.

Funzionamento

L'erezione è ottimale quando la pressione esercitata sul corpo è massima. La regolazione di questa pressione si ottiene regolando le cinghie grazie alle fibbie di serraggio. L'erezione può diventare dolorosa se questa pressione è eccessiva. Il dispositivo Le Roger sviluppa un'erezione naturale che segue il processo umano naturale: fantasie e lievi stimoli.

Rimozione

- Allentare delicatamente la chiusura esercitata dalle fibbie di serraggio
- Liberare i genitali dalla parte ventrale
- Rimuovere lentamente il dispositivo

Pulizia e manutenzione

Prendendovi cura del dispositivo, ne aumenterete la durata. Pulite Le Roger prima e dopo ogni utilizzo con sapone e acqua tiepida. Non utilizzate detergenti a base di alcool, candeggina o detergenti abrasivi. Asciugatelo e lasciatelo asciugare all'aria. Non stiratelo. Conservarlo in un luogo asciutto e pulito, al riparo dalla luce e dal calore. Evitare il contatto prolungato con oli o lubrificanti a base di silicone. Riporlo in un luogo asciutto e pulito, al riparo dal calore.

Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio. Smaltire Le Roger nei rifiuti domestici. Non gettarlo sulla strada o nell'ambiente.

Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio

Smaltire Le Roger nei rifiuti domestici. Non gettare nell'ambiente.

GARANZIA

Le Roger è coperto da una garanzia di 2 anni.

Condizioni di garanzia

Questo prodotto è coperto da una garanzia contro i difetti di fabbricazione, la cui durata dipende dalla legislazione vigente in ciascun paese (2 anni nell'Unione Europea). In caso di ricorso alla garanzia, rivolgersi al servizio clienti di Roger srl. Se è necessario spedire il prodotto, indicare il difetto riscontrato e allegare una copia della prova d'acquisto. Le condizioni di garanzia sono le seguenti:

1. Sui prodotti Le Roger viene concessa una garanzia di due anni dalla data di acquisto. In caso di intervento in garanzia, la data di acquisto deve essere comprovata presentando la prova d'acquisto o la fattura.
2. Durante il periodo di garanzia, i difetti legati a errori di materiale o di fabbricazione sono coperti gratuitamente (escluse le spese di spedizione).
3. I servizi effettuati in garanzia non comportano un prolungamento del periodo di garanzia, né per il Prodotto, né per i componenti sostituiti.
4. Sono esclusi dalla garanzia:
 - a. tutti i danni dovuti a un uso improprio, ad esempio il mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
 - b. i danni dovuti a riparazioni o interventi effettuati dall'acquirente o da terzi non autorizzati.
 - c. i danni verificatisi durante il trasporto dell'apparecchio dal sito del produttore

all'utente o durante la spedizione dell'apparecchio al servizio clienti.

d. gli accessori soggetti a normale usura.

5. Decliniamo ogni responsabilità per i danni consequenziali causati direttamente o indirettamente dal prodotto, anche quando il danno verificatosi sul prodotto è coperto dalla garanzia.

Servizio clienti

info@leroger.com

Questo prodotto è riservato esclusivamente agli adulti. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Distribuito da Roger srl, 24 rue de la Lasne, 1380 Lasne, Belgio

Roger srl® e Le Roger® sono marchi registrati. Tutti i diritti riservati.

Il design della cintura Le Roger è un'opera d'arte ed è protetto da copyright.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.leroger.com.

Ultima revisione: 11/2025 – Versione 1.1.

Lotto: vedere la confezione.

Conservare la prova d'acquisto e l'etichetta del lotto/SN per tutta la durata della garanzia.

Soggetto a modifiche senza preavviso.



Manual de utilização do Le Roger

Antes de utilizar o Le Roger, reserve alguns minutos para ler este manual.

Identificação do dispositivo

Nome comercial: Le Roger

Referência do produto: CR1-BS-511

MD Dispositivo médico de classe I – não esterilizado

UDI 05419980643711



Instruções de segurança

Leia atentamente este manual de instruções e as instruções de segurança. O não cumprimento das advertências e instruções de segurança pode causar ferimentos corporais ou danos materiais.

Guarde as advertências e instruções de segurança para consulta futura.

AVISO - Precauções de utilização

Para garantir uma utilização ideal e um bom funcionamento, este produto deve ser utilizado de acordo com as seguintes instruções. O Le Roger destina-se exclusivamente à finalidade descrita neste manual de instruções. O fabricante

não se responsabiliza por danos causados por uma utilização incorreta ou imprudente.

Indicação de utilização

O Le Roger destina-se a homens com disfunção erétil de origem venosa ou mista que desejam melhorar a rigidez e a duração da ereção através da estimulação mecânica do períneo.

O dispositivo é reservado para uso individual e pode ser utilizado em ambiente

Contraindicações

Não utilizar em caso de:

- alergia conhecida ao látex ou a qualquer componente do produto,
- patologia cutânea ou lesão na zona de contacto,
- distúrbios circulatórios graves, inflamação local ou infeção urogenital.

Em caso de dúvida, consulte um profissional de saúde. Qualquer incidente grave deve ser comunicado à Roger srl através do endereço sav@leroger.com e às autoridades locais competentes, que lhe fornecerão aconselhamento adicional.

Advertências e avisos

A utilização sob pressão não deve exceder 1 hora (60 minutos).

Não utilize o Le Roger se este apresentar sinais de deterioração (rascos, cortes, etc.).

Interrompa a utilização se sentir dor ou desconforto.

Este produto não é um método contraceptivo.

Recomenda-se a aplicação de um gel lubrificante nas partes peludas do corpo ou, eventualmente, a depilação, a fim de evitar qualquer incómodo. Utilize apenas géis à base de água para manter o Le Roger em bom estado.

Mantenha fora do alcance das crianças.

Descrição

O Le Roger é um cinto revitalizante flexível composto por uma combinação de silicone médico e tecido elástico.

Exerce uma pressão localizada na região do períneo para favorecer a restrição do retorno venoso e, assim, apoiar o mecanismo natural da ereção.

O dispositivo atua de forma mecânica, não invasiva e sem recurso a produtos químicos.

PT
RECTO

Correias DIANTEIRAS 1

Bbloqueador 2

Passagem dos
órgãos genitais 3

4 Constritor

5 Correias TRASEIRAS

6 Fivelas de aperto e
almofadas de conforto



Constritor

Passagem dos
órgãos genitais 3

Ativator 7

4

1 Correias DIANTEIRAS

5 Correias TRASEIRAS

8 Inserções para as
correias TRASEIRAS

Composição

O Le Roger é composto por:

- uma parte ventral com uma abertura oval **(3)** para permitir a passagem dos órgãos genitais,
- um bloqueador **(2)**
- um ativador que permite uma pressão localizada **(3)**
- um constritor **(4)**,
- duas correias dianteiras **(1)**,
- duas correias traseiras **(5)**, terminadas por fivelas de aperto e almofadas de conforto **(6)**.

No âmbito da melhoria contínua dos seus produtos, o fabricante reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e o design do produto, a qualquer momento, sem comunicação específica.


Funcionamento

A ereção é ideal quando a pressão exercida sobre o corpo é máxima. O ajuste dessa pressão é obtido ajustando as correias com as fivelas de aperto.


A ereção pode tornar-se dolorosa se essa pressão for excessiva.

O dispositivo Le Roger desenvolve uma ereção natural que segue o processo humano natural: fantasias e estímulos leves.

COLOCAÇÃO

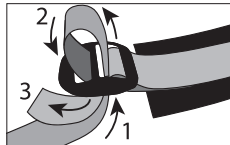


1 - Preparação das correias: Junte as correias sem as cruzar. Passe a correia livre pela fivela por baixo, na abertura central. Passe pela segunda abertura (movimento de ida e volta)

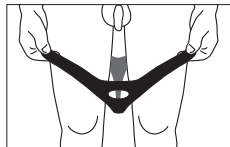

2 - Colocar o Le Roger: Coloque a parte da frente com a abertura **(3)** à sua frente. Vista o La Roger como uma peça de roupa interior. Verifique se o ativador **(3)** fica bem encostado ao corpo



3 - Posicionar os órgãos genitais: Introduza os testículos e o pênis na abertura **(3)**

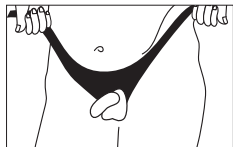

4 - Ajustar o aperto: Posicione as correias **nas ancas**. Aperte os dois lados de forma equilibrada para manter a faixa perineal centrada. O Le Roger deve exercer uma pressão firme e centrada na zona do períneo.

Remoção

- Solte suavemente o fecho exercido pelas fivelas de aperto
- Liberte os órgãos genitais da parte ventral
- Retire lentamente o dispositivo

Limpeza e manutenção

Ao cuidar do dispositivo, aumenta a vida útil do producto. Limpe o Le Roger antes e depois de cada utilização com sabão e água morna. Não utilize produtos de limpeza à base de álcool, lixívia ou detergentes abrasivos. Seque-o e deixe-o secar ao ar livre. Não passe a ferro. Guarde-o num local seco e limpo, protegido da luz e do calor. Evite o contacto prolongado com óleos ou lubrificantes à base de silicone. Guarde-o num local seco e limpo, protegido do calor..

Informações sobre descarte e reciclagem

Descarte o Le Roger no lixo doméstico. Não o descarte em vias públicas ou na natureza.

GARANTIA

O Le Roger tem garantia de 2 anos.

Condições da garantia

Este produto é coberto por uma garantia contra defeitos de fabricação, cuja duração depende da legislação em vigor em cada país (2 anos na União Europeia). Em caso de recurso à garantia, contacte o serviço de apoio ao cliente da Roger srl. Se for necessário enviar o produto, indique o defeito constatado e anexe uma cópia do comprovativo de compra.

As condições da garantia são as seguintes:

1. É concedida uma garantia de dois anos a partir da data de compra dos produtos Roger. Em caso de intervenção da garantia, a data de compra deve ser comprovada mediante a apresentação do comprovativo de compra ou da fatura.
2. Durante o período de garantia, os defeitos relacionados com erros de material ou de fabrico são cobertos gratuitamente (excluindo os custos de envio).
3. Os serviços prestados ao abrigo da garantia não implicam o prolongamento do período de garantia, nem para o produto, nem para os componentes substituídos.

4. Estão excluídos da garantia:

- a. todos os danos resultantes de uma utilização incorreta, por exemplo, o não cumprimento do manual de instruções.
- b. os danos resultantes de reparações ou intervenções efetuadas pelo comprador ou por terceiros não autorizados.
- c. danos ocorridos durante o transporte do aparelho desde as instalações do fabricante até ao utilizador ou durante o envio do aparelho para o serviço de apoio ao cliente.
- d. acessórios sujeitos a desgaste normal.

5. Declinamos qualquer responsabilidade por danos consequentes causados direto ou indiretamente pelo produto, incluindo quando os danos ocorridos no produto estão cobertos pela garantia.

Serviço ao consumidor

info@leroger.com

Este produto é estritamente reservado a adultos. Não deixar ao alcance das crianças.

Distribuído por Roger srl, 24 rue de la Lasne, 1380 Lasne, Bélgica

Roger srl® e Le Roger® são marcas registadas. Todos os direitos reservados.

O design do cinto Le Roger é uma obra de arte e está protegido por direitos de autor.

Para saber mais, visite www.leroger.com

Última revisão: 11/2025 – Versão 1.1

Lote: ver embalagem.

Certifique-se de que guarda o comprovativo de compra e a etiqueta do lote/SN durante todo o período de garantia.

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

Lote: ver embalagem



